

QUICKIE®

Rumba



Kompaktowy, możliwy do przetransportowania i z
możliwością regulacji....





Niezwykle kompaktowa podstawa umożliwiająca poruszanie się w windach i wąskich drzwiach:

Podstawa wózka Quickie Rumba może mieć zaledwie 59 cm szerokości, co umożliwia bezproblemowy dostęp do wind i wąskich pomieszczeń. Wielkość ramy można wyregulować dla użytkownika o szerokości zaledwie 48 cm! W przypadku użytkowników o szerokości powyżej 48 cm wózek Rumba nadal ma tylko 65 cm szerokości.

Łatwy transport

Łatwo zdejmowane oparcie i odłączane akumulatory w połączeniu ze składaną ramą umożliwiają łatwy transport, a waga największego elementu wynosi 37,4 kg. Idealny do przechowywania w bagażnikach i zamkniętych pomieszczeniach.

Łatwa regulacja siedziska, oparcia i podłokietników przez użytkownika;

Można przystosować dla użytkowników o szerokości od 42 cm do 54 cm, przy wielkości ramy 42 cm i 48 cm każda z podłokietnikiem 6 cm i z regulacją szerokości.

Możliwa regulacja wysokości oparcia bez narzędzi do wartości 43, 46 i 49 cm oraz regulacja kąta oparcia do 30° razem z regulacją tapicerki (opcja).

Odłączane podłokietniki z regulacją wysokości. Regulacja kąta siedziska o 3°.



Regulacja kąta nachylenia oparcia od 0° do 30°



Regulowana szerokość



Oparcie z regulacją wysokości; 43 cm, 46 cm i 49 cm



Składana rama, zdejmowane oparcie, odłączane akumulatory



Zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości Mocowanie w czasie transportu w opcji standardowej



Regulowana tapicerka (opcja)



Równoległy odchylany sterownik do stosowania przy błacie



Odlączane odchylane wsporniki nóg do łatwego transportu



Element do pokonywania krawężników



Podnoszony podnóżek



Stolik o regulowanej głębokości



Komfortowe oparcie z zagłówkiem (opcja)



Barierka stabilizująca i zagłówek (opcja)














Światła i wskaźniki



Kontrola podbródkiem z podwójnym przyciskiem i ekranem Omni + (opcja)



Specyfikacje techniczne:

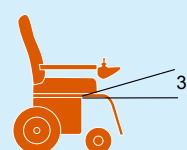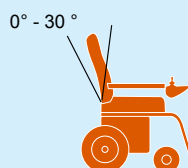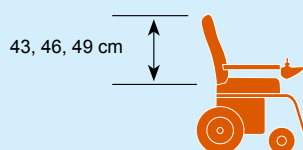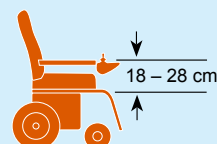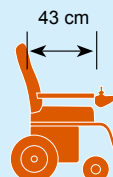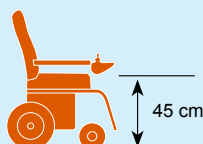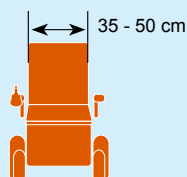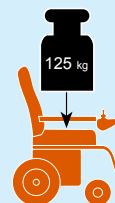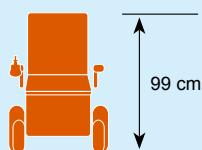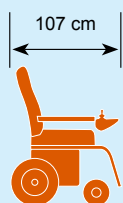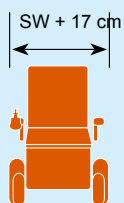

Całkowita szerokość: 42 cm [48cm] szerokość siedziska = 59cm [65cm] szerokość wózka

Szerokość po złożeniu: 39 cm

Całkowita długość (bez kółek zabezpieczających) 107 cm

Wysokość oparcia: 43 - 49 cm

Szerokość ramy siedziska: 42 cm or 48 cm

Głębokość siedziska: 43 cm

Wysokość siedziska (bez poduszki siedziska): 49 cm

Promień skrętu: 85 cm

Maks.wysokość przeszkody z systemem do wjazdu na krawężniki/bez systemu 10 / 5cm

Maks.pochyłość: 10 °

Maks.waga użytkownika: 125 kg

Maks.prędkość: 6 kph

Akumulatory: 40 Ah / [50Ah]

Kolory: Niebieski, czerwony , czarny i srebrny

STLPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



B4M

SUNRISE
MEDICAL

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg

T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com